



Instructions for use

Preemie+ Symphony Initiation Card

Gebrauchsanweisung

Preemie+ Symphony-Initiierungskarte

Mode d'emploi

Fiche d'initiation Preemie+ Symphony

Istruzioni per l'uso

Scheda di iniziazione Symphony Preemie+

Gebruiksaanwijzing

Preemie+ Symphony-initiatie programmakaart

Manual de instrucciones

Tarjeta de iniciación Symphony Preemie+

Manual de instruções

Cartão de iniciação Preemie+ Symphony

EN Symbols on the packaging: These symbols indicate:

DE Symbole auf der Verpackung: Symbolbedeutung

FR Ces symboles indiquent (que) :

IT Questi simboli indicano (che) :

NL Deze symbolen aangeven (dat):

ES Símbolos en el embalaje; estos símbolos indican:

PT Símbolos na embalagem:

Estes símbolos indicam o seguinte:

The material is part of a recovery/recycling process. Material ist Teil eines Recycling-Prozesses. Le matériel fait partie d'un procédé de récupération/recyclage. Il materiale è oggetto di un processo di recupero/riciclaggio. Het materiaal deel uitmaakt van een terugwinnings-/recyclingproces. El material es parte de un proceso de reciclaje / recuperación. O material é parte de um processo de recuperação/reciclagem.

A carton package. Kartonverpackung. Un emballage en carton. Una confezione in cartone. Een kartonnen verpakking. Un paquet de carton. Embalagem de cartão.

To keep the device away from sunlight. Vor Sonnenlicht schützen. L'appareil doit être tenu éloigné de la lumière et du soleil. Il dispositivo non deve essere esposto alla luce solare. Het apparaat niet in zonlicht geplaatst mag worden. No exponga el dispositivo al sol. Mantenha o dispositivo ao abrigo da luz solar.

To keep the device dry. Gerät trocken halten. L'appareil doit être conservé au sec. Il dispositivo deve essere mantenuto asciutto. Het apparaat droog gehouden moet worden. Mantenga el dispositivo seco. Manter o dispositivo seco.

To handle the fragile device with care. Vorsicht, zerbrechlich. L'appareil est fragile et doit être manipulé avec soin. Il dispositivo è fragile e deve essere maneggiato con attenzione. Het apparaat met zorg behandeld moet worden. Maneje este dispositivo frágil con cuidado. Manusear o dispositivo frágil com cuidado.

The humidity limitation for operation, transport and storage. Luftfeuchtigkeitsbeschränkung für Betrieb, Transport und Lagerung. La limite d'humidité à ne pas dépasser en cas de fonctionnement, de transport et de stockage.

The atmospheric pressure limitation for operation, transport and storage. Luftdruckbeschränkung für Betrieb, Transport und Lagerung. La limite de pression atmosphérique à ne pas dépasser en cours de fonctionnement, ainsi que pour le transport et le stockage.

The temperature limitation for operation, transport and storage. Temperaturbeschränkung für Betrieb, Transport und Lagerung. La limite de température à ne pas dépasser en cas de fonctionnement, de transport et de stockage.

To follow instructions for use. Gebrauchsanweisung befolgen. Il est impératif de respecter les instructions d'utilisation. Di seguire le istruzioni per l'uso. Te kennen dat de gebruiksaanwijzing gevolgd moet worden. Sigla las instrucciones de uso. Seguir as instruções de utilização.



Manufacturer
Hersteller
Fabricant
Produttore
Fabricant
Fabricante

Preemie+ Symphony Initiation Card

Indication for use

Assists breastpump dependent mothers of premature infants in initiating and maintaining their milk supply over time

Assembly Instructions

- Remove Card and Cord protector on the back of the pump
- Exchange the program card 2.0 with the Preemie+ card
- Mark the pump with the Preemie+ sticker
- Put card and cord protector back in place

Operation

For Preemie+

Press On/Off, followed by the let down button (within 10 sec.)

For Standard

Press On/Off

Preemie+ 1.0

- Use from the first time postpartum until you have reached initiation
- Afterwards, the Standard program needs to be used
- Use the Pumping Log to control and track each pumping session

The program runs continuously for 15 minutes and is a sequence of different stimulation, expression and pause phases. The display shows „Done“ if the program is finished.

Standard 2.0

- Use after you have reached Initiation
- Use the Pumping Log to control and track each pumping session


The Standard program operates 2-Phase Expression starting with a stimulation phase, followed by expression. For detailed description see the Symphony instruction manual.

Vacuum Level

Adjust the vacuum during pumping to your comfort level by turning the one-knob control clockwise (increase) or counter-clockwise (decrease).

Pumping

Select one of the available pumping programs

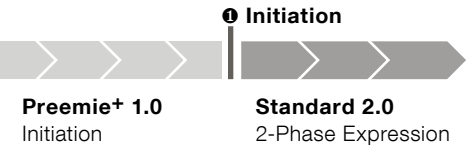

You have reached **initiation** if you have pumped 20ml in each of three consecutive pumping sessions.

Preemie+ Symphony Initiierungskarte

Indikationen für die Anwendung

Hilft Müttern mit Frühgeborenen, die auf die Milchpumpe angewiesen sind, bei der Initiierung und der Aufrechterhaltung der Milchproduktion.

Montage-Anleitung

- Entfernen Sie den Karten- und Kabelschutz auf der Rückseite der Pumpe
- Tauschen Sie die Programmkarte 2.0 gegen die Karte Preemie+ aus
- Markieren Sie die Pumpe mit dem Aufkleber Preemie+
- Bringen Sie den Karten- und Kabelschutz wieder an

Betrieb

Für Preemie+

Drücken Sie Ein-/Aus-Taste und anschließend (innerhalb von 10 s) die „Let-down“ Taste.

Für den Standardbetrieb

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste

Preemie+ 1.0

- Verwenden Sie dieses Programm für den Zeitraum direkt nach der Geburt bis zur Initiierung der Milchproduktion
- Anschließend ist das Standard-Programm zu verwenden.
- Verwenden Sie das Abpumpprotokoll zur Kontrolle und Nachverfolgung aller Abpumpsitzen.

Das Programm läuft fünfzehn Minuten lang ohne Unterbrechung und umfasst eine Abfolge verschiedener Stimulations-, Extraktions- und Pausenphasen. Nach Abschluss des Programms wird „Ende“ im Display angezeigt.

Standard 2.0

- Nach der Initiierung der Milchproduktion verwenden
- Verwenden Sie das Abpumpprotokoll zur Kontrolle und Nachverfolgung aller Abpumpsitzen


Das Standard-Programm beinhaltet die „2-Phase Expression“, anfangen mit einer Stimulationsphase und gefolgt von der Abpumpphase. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Gebrauchsanweisung zur Symphony Milchpumpe.

Vakuum

Stellen Sie das Vakuum auf die für Sie angenehme Stärke ein, indem Sie den Bedienknopf im Uhrzeigersinn (erhöhen) oder im Gegenuhrzeigersinn (verringern) drehen.

Abpumpen

Wählen Sie eines der verfügbaren Abpumpprogramme

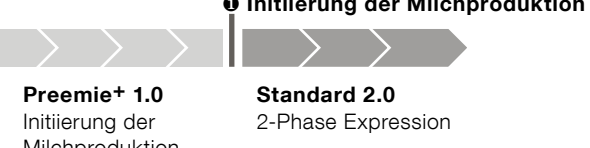

Sie haben die **Initiierung** erreicht, sobald Sie in drei aufeinanderfolgenden Abpumpvorgängen jeweils 20 ml abgepumpt haben.

Fiche d'initiation Preemie+ Symphony

Indications

Ce modèle de tire-lait est prévu pour les mères qui ne peuvent pas allaiter leur bébé au sein et doivent exclusivement exprimer leur lait pour allaiter leur bébé. Il permet de bien initier et maintenir la production lactée au fil des jours.

Istruzioni d'assemblage

- Retirez la carte et la protection du cordon à l'arrière du tire-lait
- Remplacez la carte du programme 2.0 par celle pour Preemie+
- Apposez l'étiquette du programme Preemie+ sur le tire-lait
- Repositionnez la carte et la protection du cordon

En service

Preemie+

Appuyez sur le bouton marche/arrêt, puis sur le bouton d'écoulement. (dans les 10 s).

Standard

Appuyez sur le bouton de marche/arrêt.

Preemie+ 1.0

- Peut être utilisé immédiatement après l'accouchement, jusqu'à ce que vous connaissiez parfaitement le fonctionnement
- Vous devez ensuite passer au programme Standard
- Vous pouvez contrôler les séances d'expression et assurer leur suivi à l'aide du journal d'expression du lait maternel.

Le programme est exécuté de façon ininterrompue pendant 15 minutes, alternant entre les phases de stimulation, d'expression et de pause. Lorsqu'il est terminé, l'écran indique « Fin ».

Standard 2.0

- Peut être utilisé une fois que vous connaissez le fonctionnement
- Vous pouvez contrôler les séances de pompage et assurer leur suivi à l'aide du journal de pompage


Le programme standard fonctionne en mode «2-Phase Expression», commençant par une phase de stimulation et suivie par l'expression. Pour obtenir une description détaillée, consultez le manuel d'utilisation Symphony.

Niveau de force d'aspiration

Lors de l'expression, réglez la force d'aspiration à votre convenance en faisant pivoter le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre (augmenter) ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (diminuer).

Expression

Sélectionnez l'un des programmes de pompage disponibles.

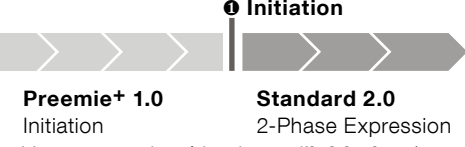

Si vous avez achevé la phase d'**initiation** (et connaissez donc le fonctionnement de l'appareil) après avoir exprimé 20 ml de lait par séance au cours de trois séances d'expression consécutives.

Scheda di iniziazione Symphony Preemie+

Istruzioni per l'uso

Aiuta le mamme di bambini prematuri che utilizzano tirallatte ad avviare e mantenere costante il flusso del latte.

Istruzioni di montaggio

- Rimuovere la scheda e la protezione del cavo dalla parte retrostante del tirallatte
- Sostituire la scheda di programma 2.0 con la scheda Preemie+
- Contrassegnare il tirallatte con l'etichetta Preemie+
- Rimettere al suo posto la scheda e la protezione del cavo

Utilizzo

Per la Preemie+

Premere On/Off, seguito dal pulsante di erogazione (entro 10 secondi).

Per la Standard

Premere On/Off.

Preemie+ 1.0

- Da usare a partire dal primo pompaggio dopo il parto fino alla fase di iniziazione
- In seguito, utilizzare il programma Standard
- Usare il Registro di estrazione per controllare e registrare ogni sessione di pompaggio

Il programma funziona ininterrottamente per 15 minuti e consiste in una sequenza di diverse fasi di stimolazione, estrazione e pausa. Sul display appare „Done“ (fatto) se il programma ha terminato.

Standard 2.0

- Da usare dopo aver raggiunto la fase di iniziazione
- Usare il Registro di estrazione per controllare e registrare ogni sessione di pompaggio

Il programma Standard funziona con 2-Phase Expression, una tecnologia che combina una fase di stimolazione con una successiva di estrazione. Per maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni di Symphony.

Livello di vuoto

Regolate a vostro piacimento il livello di vuoto durante il funzionamento ruotando la manopola di controllo in senso orario (aumento) o antiorario (diminuzione).

Pompaggio

Selezionare uno dei programmi di pompaggio disponibili.



Si può considerare di aver raggiunto la fase di **iniziazione** del flusso se si sono estratti 20 ml in ogni sessione di pompaggio per tre volte consecutive.

Preemie+ Symphony-initiatie programmakaart

Gebruiksindicaties

Helpt de melkproductie van moeders van premature baby's die moeten kolven op gang brengen en in stand houden.

Montage

- Verwijder de kaart en beschermkap aan de achterkant van de kolf
- Vervang de programmakaart 2.0 met de Preemie+-kaart
- Markeer de kolf met de Preemie+-sticker
- Plaats de kaart en beschermkap weer terug

Gebruik

Voor Preemie+

Druk op Aan/uit, gevolgd door de toeschiettoets (binnen 10 sec.)

Voor Standaard

Druk op Aan/uit

Preemie+ 1.0

- Te gebruiken vanaf de eerste sessie na de geboorte tot u initiatie hebt bereikt
- Daarna moet u het standaardprogramma gebruiken
- Gebruik het kolflogboek om de gegevens van iedere kolfsessie bij te houden

Het programma loopt onafgebroken gedurende 15 minuten en bestaat uit een serie verschillende stimulatie-, expressie- en pauzeerfasen. Als het programma klaar is, wordt op het scherm „Gedaan“ weergegeven.

Standaard 2.0

- Te gebruiken nadat u initiatie hebt bereikt
- Gebruik het kolflogboek om de gegevens van iedere kolfsessie bij te houden


Het standaardprogramma is gericht op 2-Phase Expression: stimulatiefase gevolgd door expressiefase. Raadpleeg de Symphony gebruiksaanwijzing voor een gedetailleerde beschrijving.

Vacuümniveau

Pas het vacuüm tijdens het kolven aan door de enige knop met de klok mee (meer) of tegen de klok in (minder) te draaien.

Kolven

Selecteer een van de beschikbare kolfprogramma's

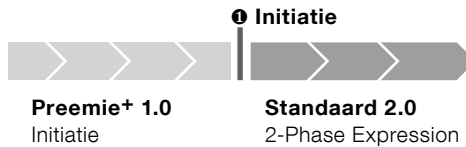

U hebt **initiatie** bereikt als u in drie achtereenvolgende kolfsessies 20 ml melk hebt gekolfd.

Tarjeta de iniciación Symphony Preemie+

Indicaciones de uso

Ayuda a las madres de bebés prematuros que dependen de extractores de leche materna a iniciar y mantener el suministro de leche durante un periodo.

Instrucciones de montaje

- Retire la tarjeta y el protector del cable de la parte posterior del extractor
- Cambie la tarjeta de programa 2.0 por la tarjeta Preemie+
- Marque el extractor con la pegatina Preemie+
- Vuelva a poner en su sitio la tarjeta y el protector del cable

Funcionamiento

Para Preemie+

Pulse el botón de encendido / apagado, seguido del botón de bajada (en menos de 10 segundos).

Para Standard

Pulse el botón de encendido / apagado.

Para Preemie+ 1.0

- Utilice el extractor desde el primer momento del posparto hasta que haya alcanzado la fase de iniciación
- Después tendrá que utilizar el programa Standard
- Utilice el Informe de extracción para controlar y hacer un seguimiento de cada sesión de extracción

El programa se ejecuta de forma continua durante 15 minutos y es una secuencia de diferentes fases de estimulación, extracción y pausa. Aparecerá „Terminado“ en la pantalla cuando el programa haya terminado.

Standard 2.0

- Utilícelo después de alcanzar la fase de iniciación
- Utilice el Informe de extracción para controlar y hacer un seguimiento de cada sesión de extracción


El programa Standard acciona una 2-Phase Expression, que comienza con una fase de estimulación y a la que le sigue otra de extracción. Para obtener una descripción detallada, véase el manual de instrucciones de Symphony.

Nivel de vacío

Durante la extracción, regule la succión a su gusto girando el botón en el sentido de las agujas del reloj para aumentarla o en sentido contrario para disminuirla.

Extracción

Seleccione uno de los programas de extracción disponibles.

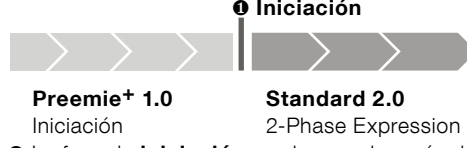

La fase de **iniciación** se alcanza después de extraer 20 ml en cada una de las tres sesiones de extracción consecutivas.

Cartão de iniciação Preemie+ Symphony

Instruções para uso

Auxilia as mães de bebês prematuros dependentes de extrator de leite materno a iniciar e a manter a sua produção de leite ao longo do tempo

Instruções de montagem

- Retire o protector do cartão e do cabo da parte de trás do extractor
- Substitua o cartão de programação 2.0 pelo cartão Preemie+
- Marque o extractor com o autocolante Preemie+
- Volte a colocar o protector do cartão e do cabo no lugar

Funcionamento

Para Preemie+

Prima o botão de Ligar/Desligar, e em seguida o botão extrair (no espaço de 10 seg.)

Para Standard

Prima Ligar/Desligar

Preemie+ 1.0

- Use desde a primeira vez após o parto e até ter atingido a iniciação
- De seguida, é necessário utilizar o programa Standard
- Utilize o Registo de Extracção para controlar e registar cada sessão de extracção

O programa funciona em contínuo durante 15 minutos e tem uma sequência de diferentes fases de estimulação, expressão e pausa. O visor mostra „Done“ (terminado) se o programa terminou.

Standard 2.0

- Utilize depois de ter atingido a Iniciação
- Utilize o Registo de Extracção para controlar e registar cada sessão de extracção


O programa Standard faz a 2-Phase Expression (extracção de 2 fases), iniciando-se com uma fase de estimulação, seguida pela de extracção. Para uma descrição detalhada consulte o manual de instruções do Symphony.

Nível de vácuo

Regule o vácuo durante o funcionamento do extractor para o seu nível de conforto rodando o comando de um botão para a direita (aumentar) ou para a esquerda (reduzir).

Extracção

Selecione um dos programas de extracção disponíveis

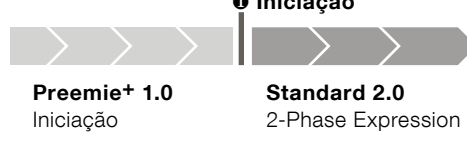

Atingiu a **iniciação** se conseguiu extrair 20 ml em cada uma de três sessões consecutivas de extracção.

